


Schonende und gründliche Reinigung von Mikrotiterplatten durch **SONOREX** Ultraschall

Zubehör für SONOREX SUPER Ultraschallbäder im mikrobiologischen und medizinischen Labor:

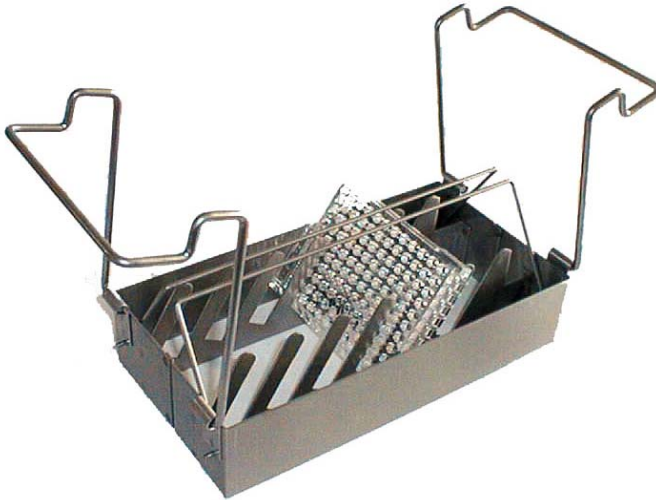

Mikrotiterplattenhalter MT 6

- keine Kreuzkontamination durch verbliebene Reste in den Kavitäten
- reproduzierbare Ergebnisse
- keine Beschädigung der Kavitäten durch mechanisches Kratzen oder Bürsten
- Aufnahme von 6 Platten gleichzeitig

Mikrotiterplattenhalter MT 6 für SONOREX SUPER Ultraschallbäder:

- in RK 1028/H passen 3 MT 6
- in RK 514 BH passt 1 MT 6

Mikrotiterplattenhalter MT 6 Best.-Nr. 262

Ultraschall-Reinigungskonzentrate

TICKOPUR R 33 – Universal-Reiniger

Materialschonend, mild-alkalisch,
pH 9,9 (1 %). Anwendung 1–5 % - 1–10 min

1 Liter Best.-Nr. 830
2 Liter Best.-Nr. 883

STAMMOPUR 24 – Intensiv-Reinigung und Desinfektion VAH-zertifiziert.

Rückstandsfrei abspülbar, geruchsneutral, sehr hohe Materialverträglichkeit. Aldehyd-, chlor- und phenolfrei. Bakterizid (inkl. Tb.-B.), fungizid, begrenzt viruzid (Vakzinia, HBV, HCV, HIV, BVDV, H5N1).

2 Liter Best.-Nr. 977

Mild-alkalisch, pH 9,4 (1 %). Anwendung 1 % – 15 min.
Standzeit der gebrauchten Lösung: 3 Tage.

Zusammensetzung

100 g enthalten: 9,9 g Bis(3-aminopropyl)dodecylamin, 8,4 g Didecylmethylpoly(oxyethyl)ammoniumpropionat, 5 - 10 % nichtionische Tenside, 30 - 50 % Lösemittel, Komplexbildner, pH-Regulatoren, Stellmittel.

Gutachten: Bakterien Pilze gemäß DGHM: Prof. Dr. Schubert, Frankfurt 8/99, Prof. Dr. Werner, Schwerin 12/98, Dr. F.A. Pitten, Gießen 11/05. **HBV/HIV:** Prof. Dr. Frösner, München 8/99. **Vakzinia, BVDV, HCV, H5N1:** Prof. Dr. Döhner, Dr. D. Becher, Greifswald 8/06 und 1/07. **Ultraschallzeitverkürzung:** Dr. W.U. Färber, Gießen 08/02. **Standzeitbestimmung:** Prof. Dr. Werner, Schwerin 10/99. **Gefahrenbezeichnung: C Ätzend**

Vor Verwendung des Desinfektionspräparates stets Etikett und Produktinformation lesen!

5580n/2007-12

Technische Änderungen vorbehalten.

BANDELIN

info@bandelin.com
www.bandelin.com

55 Jahre
Ultraschallerfahrung
Zertifizierung nach EN ISO 9001:2000
EN ISO 13485:2003

BANDELIN *electronic*
GmbH & Co. KG
Heinrichstraße 3–4 • D-12207 Berlin
Telefon: +49-30-768 80-0
Telefax: +49-30-772 20 14